




## Micropipeta Autoclaveable de 1000-10000ul

### Descripción:


Micropipeta autoclaveable de volumen variable, diseño ergonómico con peso distribuido y pistón magnético que evita el cansancio en el trabajo de rutina. Sistema de seguridad en el volumen para evitar imprecisiones en el pipeteo. Con código de colores en el botón. Calibración según norma ISO 8655-6, calibración simple sin el uso de herramientas, fabricada con materiales de gran durabilidad y alta resistencia química.



Pistón con asistencia magnética para resultados precisos

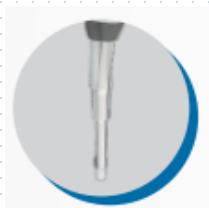

Punta de aleación especial para alta resistencia química

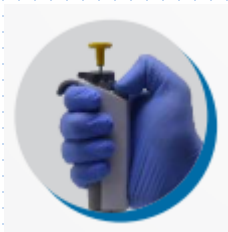

Expulsión sin esfuerzo y mecanismo único absorción de impactos.



Visualización grande y claro de 4 dígitos



Compatible con puntas universales



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO2001419</b>
Modelo	AFV-10000
Serie	Fab
Rango de Volúmen	1000 A 10000ul
Incrementos de	20ul
Volumen de prueba / Inexactitud	1000ul, +/- 3%, 5000ul, +/- 0.8% 10000ul, +/- 0.6%
Volumen de prueba / Imprecisión	1000ul, +/- 0.6%, 5000ul, +/- 0.2% 10000ul, +/- 0.15%
Peso total c/empaque	400g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	310*160*55mm