

Campana de bioseguridad Clase II, Tipo A2



Descripción:


Campana de bioseguridad clase II, tipo A2. Clase 100, control digital con microprocesador, pantalla LCD retroiluminada, reloj, cámara estructuralmente reforzada con interiores en acero inoxidable tipo 304 y exteriores en acero electro-galvanizado con pintura epóxica, puerta de cristal templado de 6mm, diseño con acabados sanitarios que facilitan la limpieza, filtro HEPA con eficiencia de 99.999%, retención de partículas de 0.3um. Ventilador centrifugo de alta eficiencia con control de velocidad. Monitoreo de velocidad y temperatura del aire, control automático de velocidad, alarma visual y audible, paro automático por apertura de puerta. Brinda protección al operador y al ambiente manteniendo un entorno seguro. Incluye base de acero tubular armable.



Panel de control



70% del aire es recirculado,
30% del aire es expulsado

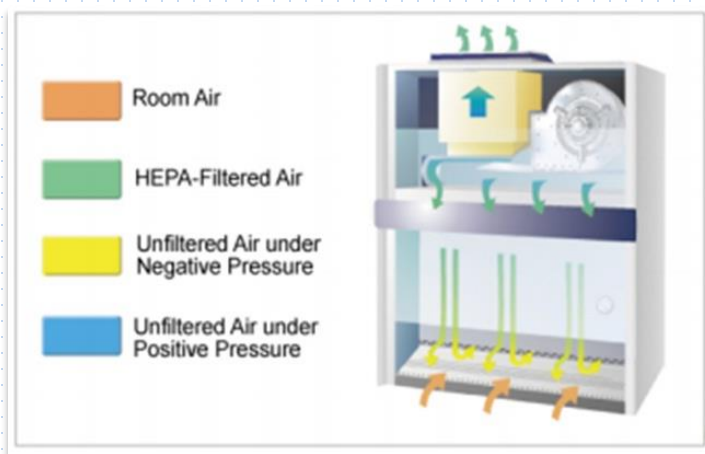

Flujo del aire

Especificaciones:

Modelo	LCB-0103B-A2
Velocidad de flujo de aire	0.3 - 0.35m/seg. (Hacia parte inferior) > 0.5m/seg. (hacia el interior)
Ruido	55dBA
Iluminación	1100 luxes
Lampara UV	UV 20W
Lampara fluorescente	FL 20W
Volumen de aire	980 m ³ /h
Medidas de cámara (W*D*H)	890x600x600mm
Medidas externas (W*D*H)	1050*800*1170mm
Alimentación eléctrica	Contacto doble de 110V, 50/60Hz

Incluye: Contacto doble polarizado, salidas para gas y aire