


Balanza para humedad 200g*0.001g



Descripción:

Balanza programable para determinación de humedad, gran versatilidad para adecuarse a las necesidades del operador. Es preciso de resultados confiables. Genera un calentamiento ultra rápido y uniforme por medio de su lampara circular halógena IR de 415W. Tiene Pantalla grafica de LCD retroiluminada y teclado alfanumérico. Cuenta con sensor Mono-Tech de precisión analítica, su plato es de acero inoxidable, integra puerto USB, RS232C Bidireccional y Ethernet PS2. Tiene la opción de contraseña de protección, memoria con gran capacidad de almacenamiento y calibracion externa.

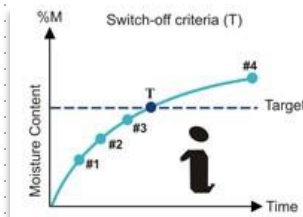

Especificaciones:

Catalogo	MB-200
Capacidad	200g
Legibilidad	0.001g
Legibilidad (humedad)	0.001%
Repetibilidad (Desv. Std), %M Para peso de muestra inicial= 2g Para peso de la muestra	0.1% 0.03%
Rango de tara	200g
Rango de humedad	0-100%
Rango de temperatura	30 – 175°C
Opciones de calentamiento	Estándar, suave, rápido, a pasos, alta temperatura
Tamaño del plato	90mm
Unidades de medición	% M, %D, %R (ratio), Gm/Lt, %M Atro, %D Atro
Capacidad de memoria	1000 pruebas
Memoria para programación	40 métodos
Peso	5 Kg
Medidas totales (W*D*H)	211*342*187mm
Consumo eléctrico	415W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz.