


## Incubadora digital de mesa con agitación




### Descripción:

Incubadora de mesa con agitación, control digital PID con microprocesador, pantalla táctil de 3.2" LCD de fácil lectura. Estructura en acero esmaltado de alta resistencia, puerta abatible de acrílico, motor DC con sistema Direct Drive libre de carbones, paro automático al abrir la puerta. Incluye plataforma de aleación de aluminio y 8 pinzas de acero inoxidable para frascos de 250ml.

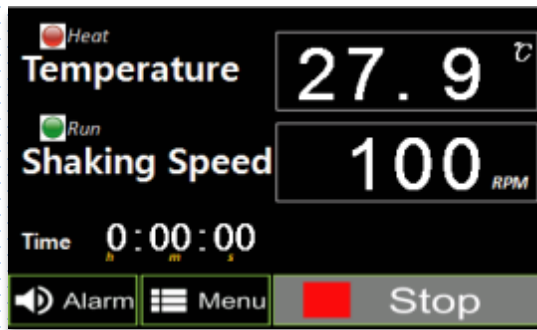

Pantalla táctil de 3.2" LCD con fondo negro para mejor visibilidad

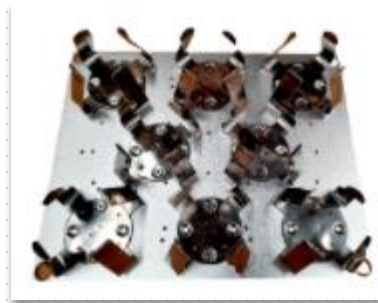

Plataforma perforada de aleación de aluminio con 8 pinzas de acero inoxidable para frascos de 250ml.

#### Especificaciones:

Modelo	NB-T205-H25
Rango de Temperatura	35 A 60°C
Incrementos	0.1°C
Exactitud	± 0.25°C a 37°C
Velocidad de agitación	30 - 300 rpm
Incrementos	±1 rpm
Diámetro de orbita	22mm
Reloj	De 99h 59min 59seg / continuo
Peso	13Kg
Medidas plataforma (W*D)	250*310mm
Medidas totales (W*D*H)	285*400*290mm
Consumo eléctrico	250W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz