


LUZEREN®

Embudo de separación c/llave teflón 250ml

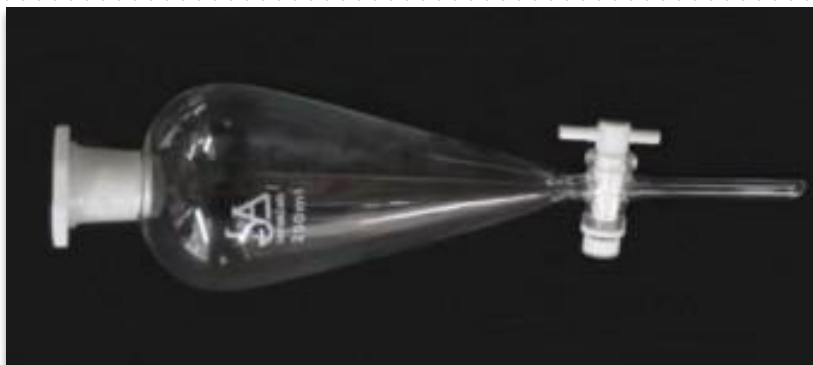

Descripción:

Embudo de separación en con llave de teflón, junta esmerilada y tapón de plástico. Empleado para separar dos líquidos inmiscibles por medio de llave de paso que regula o corta el flujo de líquido a través del tubo.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001075
Capacidad	250ml
Diámetro de pera	84mm
Largo total	300mm
Diámetro del vástago	8mm
Diámetro interno del cuello	19mm
Junta esmerilada	19/26
Color	Claro