


LUZEREN®

Parrilla agitadora circular digital 100mm

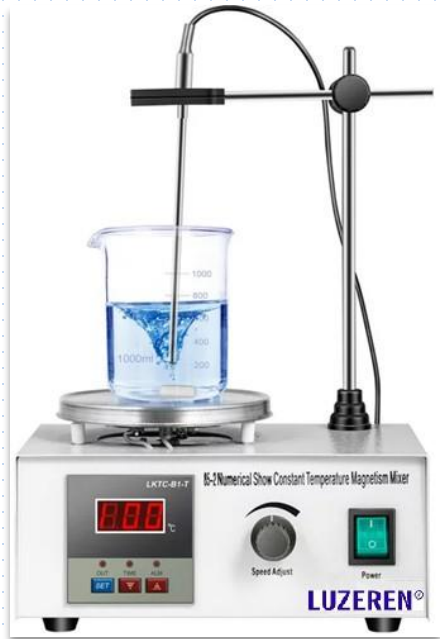

* Incluye varilla soporte para sujeción y magneto.

Especificaciones:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Catalogo | PRO1007748 |
| Modelo | 85-2 |
| Capacidad máxima | 2000ml |
| Diámetro de plato | 100mm |
| Rango de temperatura | Amb +/-5% a 100°C |
| Precisión de temperatura | +/-1°C |
| Potencia del motor | 25W |
| Consumo | 300W |
| Rango de Velocidad | 0 – 2400 RPM |
| Peso | 2.45Kg |
| Medidas totales(L*W*H) | 150*225*125mm |
| Alimentación eléctrica | 110V 50/60Hz, 15A |

Descripción:

Parrilla de agitación magnética de calentamiento suave, silenciosa y libre de vibraciones. Cuenta con placa circular de acero inoxidable tipo 304. Panel de control con microprocesador PID con pantalla de LED y sensor de temperatura. Armazón fabricado en aleación de aluminio para evitar la oxidación. Ideal para la enseñanza, protección al medio ambiente, saneamiento, aplicaciones medicas y demás laboratorios multidisciplinarios.