

LUZEREN®

Refractómetro para Alcohol 0-80% (ATC)



Especificaciones:


Catalogo	PRO2001463
Rango	0 – 80% Alcohol
Precisión	+/-0.2% Vol.
Temperatura de Referencia	20°C (compensación)
Rango de compensación	0 a 30°C
Peso	250g
Medidas totales (Dia*L)	38*195mm

Descripción:

Refractómetro análogo portátil para determinación del porcentaje o grado de alcohol en una disolución. Fabricado con materiales de alta resistencia y durabilidad. Ocular de goma suave y enfoque manual ajustable.

Para lograr una correcta medición se deben utilizar soluciones sin ningún tipo de pigmentación ni contenido en azúcares. Es el instrumento Ideal para destilados, licores, soluciones alcohólicas para farmacia o industria. Incorpora la función de compensación automática de temperatura (ATC).

Para su calibracion se utiliza agua destilada a 20°C. Se añade el agua destilada, si no marca 0, se deberá reajustar mediante el tornillo. Es recomendable revisar la calibración con cierta frecuencia.

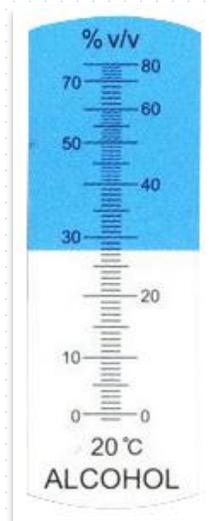

Incluye pipetas de transferencia, paño suave, destornillador y estuche rígido.